



商品名「ラバラバ」について
2種類の特殊なゴム（ラバー）を
使用していることから
「ラバラバ」と命名しました。

<日本製>

弱圧 弾性ストッキング

ラバラバ

ひざ上タイプ

下肢の「むくみ」の軽減に
「履きやすく、そして履かせやすい」弱圧ストッキング

「ラバラバ」は、こんな方に使って頂きたい
「弱圧弾性ストッキング」です。

- 足に「むくみ」が見られる方、廃用性浮腫の方に
- 運動不足による「ふくらはぎのむくみ」に
- 寝ている時間が長い方に

上下が認識しやすいライン

製品上部にラインを入れ上下を判りやすくしました。

肌が敏感な方でも安心

肌にあたる部分に縫い目がありません。

1人でも着脱可能

低圧迫、そして縦伸びしにくい設計でお一人でも履きやすい。

足の甲は少し細く設計

足先部分は生地を変えて少し細くし
圧迫がかかるように設計しています。

長期間、圧迫力を維持

洗濯、日光に強く、長期間圧迫力を維持します。

圧迫力

8~12
mmHgの
弱圧

【製品特長】

① “肌にやさしい” 皮膚トラブルを軽減した設計

内側はふんわりとした生地感。外側に縫い目が来るように設計。
皮膚トラブルの原因でもある「ずれ」を軽減すべく、ストッキングの横糸に「特殊ゴム」を採用
横糸で圧をコントロールしています。圧がかかりすぎず「ピタッ」と密着する感じです。

② “履きやすい・履かせやすい” 弱圧の 8~12mmHg

あえて「縦伸びしにくい」設計とし、自身でも上部を持って引っ張りながら履きやすいように設計。
介護者も「履かせやすい」適度な圧迫力となっています。上下が認識しやすい目印付き。

③ “足先のむくみ”に対応

足背から足首にかけては生地を変えて少し圧がかかるよう設計、足の甲のむくみにも対応。

④ “高い耐久性”でコストを抑えます。


洗濯、日光に強い。劣化しにくい特殊ゴムを採用で圧迫力も維持。

※この商品に使用している特殊ゴムは検査機関にて【皮膚貼り付け検証】実施済みのゴムを使用しております。

「ラバラバ」：こんな方におすすめいたします。

- ・廃用性浮腫の方
- ・ベッドで寝ている機会が多い方
- ・在宅で生活しており下肢に浮腫が見られる方

圧迫力について：弱圧の8～12mmHg

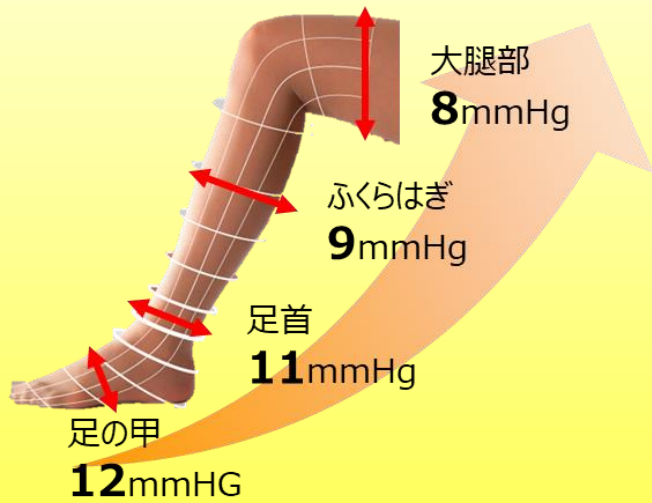

・8～12mmHgの「弱圧」に設定。
足の甲から大腿部にかけて、圧が抜ける設定になっております。

・「足の甲」のむくみに
対応する為、
足先の生地を変え
+1mmHg圧を
かけています。



商品スペック：ラバラバひざ上タイプ

製品名	JANコード	足首周囲	ふくらはぎ部	大腿中央部
ラバラバ ひざ上タイプ ベージュ (S)	4589787302935	19.0cm～23.0cm	30.0cm～36.0cm	42.0cm～52.0cm
ラバラバ ひざ上タイプ ホワイト (S)	4589787302966			
ラバラバ ひざ上タイプ ベージュ (M)	4589787302942	21.0cm～25.0cm	32.0cm～40.0cm	45.0cm～54.0cm
ラバラバ ひざ上タイプ ホワイト (M)	4589787302973			
ラバラバ ひざ上タイプ ベージュ (L)	4589787302959	23.0cm～28.0cm	35.0cm～43.0cm	48.0cm～57.0cm
ラバラバ ひざ上タイプ ホワイト (L)	4589787302980			
包装入数	2枚入 ※左右1枚ずつ			
価格（消費税別）	2,200円			

「ラバラバ」ポジショニング： 弾性ストッキングと筒状包帯の中間のイメージ



ご利用頂いた方の声

- むくみのある高齢者様に試着してもらいました。腕の力が弱い方でも自分で引っ張りやすく「するする」と履けました。履かせるとしても履かせやすいですね。生地も柔らかいので履いた感じも良さそうです。
<40代・看護師>
- ベッドにいる時間が長く、運動もできないのでむくみに困っていました。これを履くと足が締まった感じになって気持ちいいですね。
おかげさまでむくみも減ってきました。
<60代・女性>

パッケージ
(表)



(裏)



※使用上の注意

- サイズの合わないものや2枚重ねでの着用はしないで下さい。
- 気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- 色の異なるものと一緒に洗液をつけないでください。
- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。

素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン



製造販売元：九州メディカルサービス株式会社

福岡県久留米市螢川町4番地4

資料請求先：東京営業所 ヘルスクエア事業部 Tel. 03-3863-8028 / Fax. 03-3863-8029



九州メディカルサービス
株式会社ホームページ
<https://www.kyushu-med.jp/>